


REGANESTH® unoplex


Ultraschallgestützte periphere
Nervenblockaden

Luer

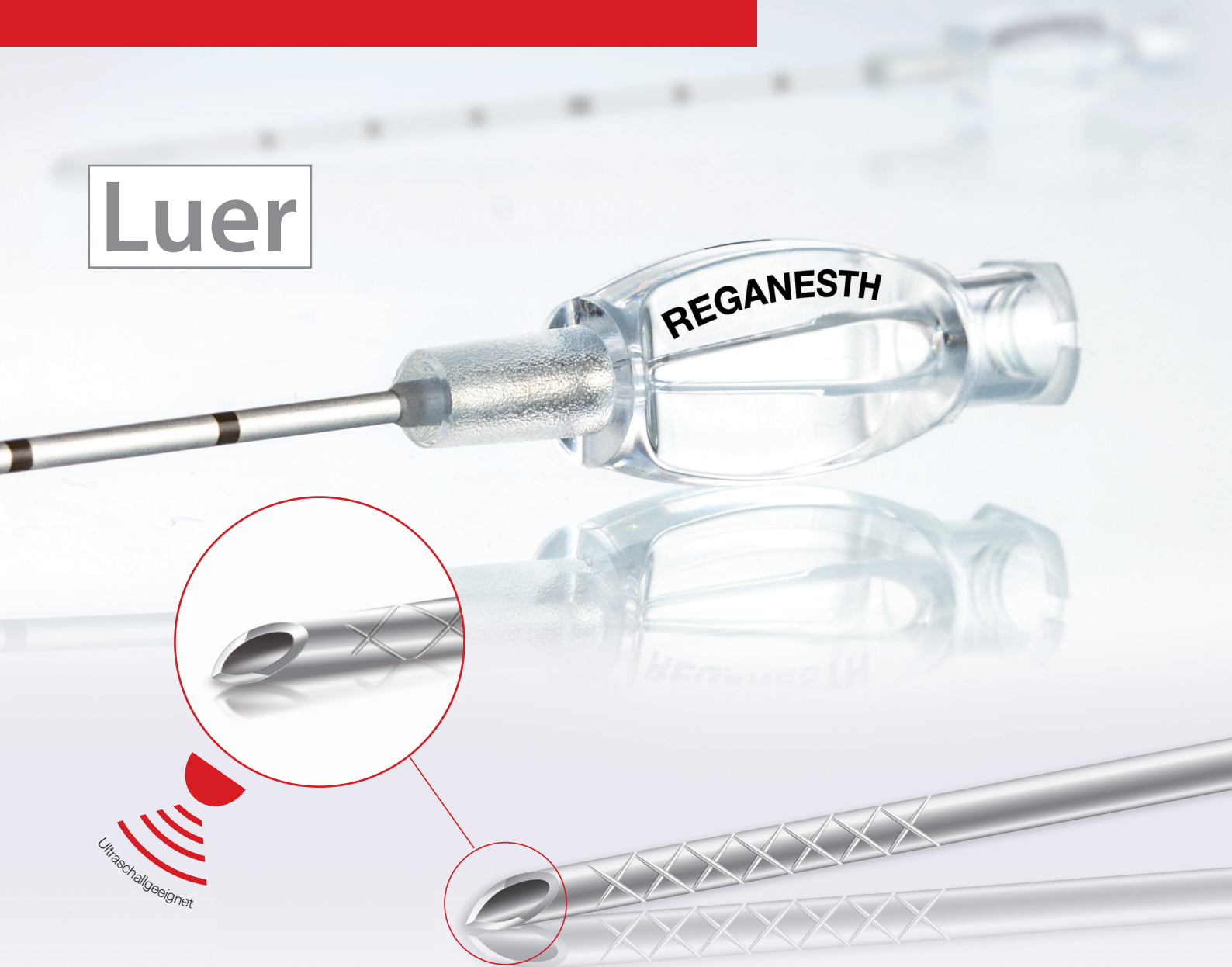

Ultraschalloptimiertes Kanülendesign

- ✓ Die REGANESTH® unoplex Kanüle wurde für die Durchführung rein ultraschallgeführter Nervenblockaden entwickelt
- ✓ Die Kanülenspitze mit Rhombus Cut ermöglicht eine ausgezeichnete Sichtbarkeit, auch bei steilen Einstichwinkeln

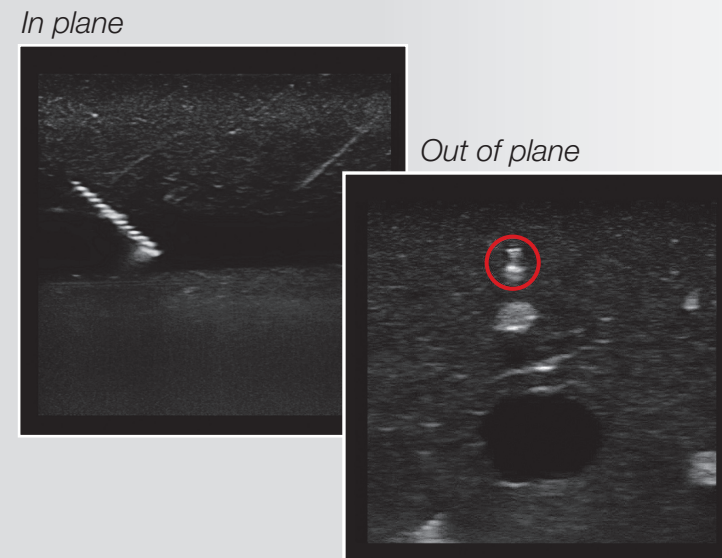

Katheter-Sets


- ✓ Knickstabiler Katheter mit zentraler Öffnung oder geschlossener Spitze und drei seitlichen Öffnungen
- ✓ Inhalt: REGANESTH® unoplex mit Zuspritzschlauch, Katheter mit Einführhilfe und Tiefenmarkierungen, Tuohy-Borst Adapter, Flachfilter 0,2 µm und Flachfilterfixierung

Eigenschaften

- **Ultraschalloptimierte Kanülenspitze:** Die reflektierende *Rhombus Cut* Ultraschallmarkierung auf der Kanülenspitze ermöglicht eine ausgezeichnete Echogenität der Kanüle – auch bei steilen Einstichwinkeln. Zusätzlich optimiert wird die Echogenität durch den Facettenschliff.
- **Ergonomisches Griffstück:** Ermöglicht das komfortable und sichere Handling der Kanüle. Zudem kann die Schliffrichtung durch die seitliche Schliffmarkierung auf dem Griffstück schnell und einfach identifiziert werden.
- **Dekonnektierbarer Zuspritzschlauch:** Der 60 cm lange Zuspritzschlauch kann bei Bedarf leicht vom Konnektor entfernt werden.



MADE IN
GERMANY

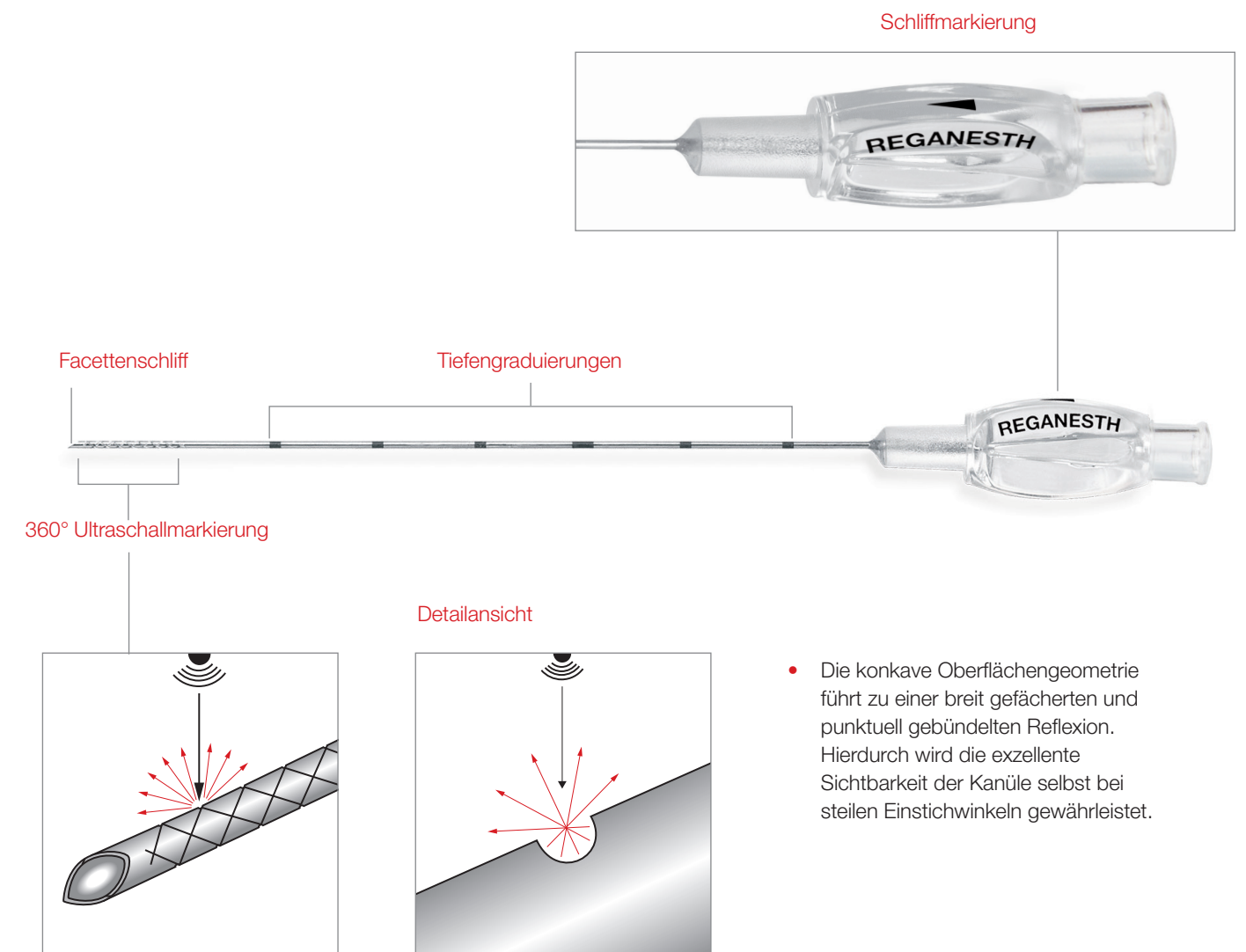

TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG

Zinsdorfer Weg 16
33181 Bad Wünnenberg

Tel.: +49 2953 98 49 0

Fax: +49 2953 72 41

info@transmed-medizintechnik.de

www.transmed-medizintechnik.de


REGANESTH® Bestellinformation – Single-Shot Kanülen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE
79.8096.040	REGANESTH® unoplex 25G x 40 mm mit dekonnektierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.050	REGANESTH® unoplex 22G x 50 mm mit dekonnektierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.080	REGANESTH® unoplex 22G x 80 mm mit dekonnektierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.100	REGANESTH® unoplex 20G x 100 mm mit dekonnektierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.120	REGANESTH® unoplex 20G x 120 mm mit dekonnektierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10

REGANESTH® Bestellinformation – Katheter-Sets

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE
79.8096.185	Unoplex-Katheter-Set 18G/50 mm REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, Plexus-Katheter 21G x 400 mm, geschlossene Spitze mit drei seitlichen Öffnungen und Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm mit Fixierung	5
79.8096.285	Unoplex-Katheter-Set OE 18G/50 mm REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, Plexus-Katheter 21G x 500 mm, zentrale Öffnung, mit Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm mit Fixierung	5
79.8096.150	REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm C	20
79.8096.188	Unoplex-Katheter-Set 18G/80 mm REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, Plexus-Katheter 21G x 400 mm, geschlossene Spitze mit drei seitlichen Öffnungen und Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm mit Fixierung	5
79.8096.288	Unoplex-Katheter-Set OE 18G/80 mm REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, Plexus-Katheter 21G x 500 mm, zentrale Öffnung, mit Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm mit Fixierung	5
79.8096.180	REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm C	20

Auch mit ISO 80369-6 NRFit™ Non-Luer Konnektor erhältlich.

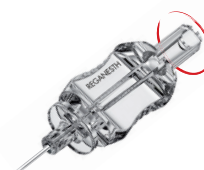

NRFit™
Non-Luer Konnektor gemäß ISO 80369-6